

BEJLISTA

THERMAL VEST



Kullanım Kılavuzu

Ürün Tanımı

- Thermal Mat, güvenli kullanım, dayanıklılık ve maksimum fayda için 10 katmandan oluşmaktadır.
- Maksimum fayda için, enerjiyi en iyi yansıtan altıgen şeklinde, 238 adet Kisamunsag Yeşim Taşı kullanılmıştır.
- Silinebilir ve ısıya dayanıklı özel ithal kumaş kullanılmıştır.
- Farklı bedenlerde kullanılabilmesi için ayarlanabilir klipslere sahiptir.
- Konforlu bir kullanım için ayarlanabilir zamanlama moduna sahiptir.
- Taşıma çantası ile istediğiniz yere götürüp 220 V priz olan her yerde kullanabilirsiniz.

Kullanma Talimatı

- Klipsleri kullanarak bedeninize göre ayarlayınız.
- Açma/Kapama tuşuna basarak açınız.
- Isı menüsünden istediğiniz ısıya getiriniz.
- İsterseniz zamanlama tuşuna basarak çalışma süresiniz ayarlayınız.
- Zaman tuşuna basmazsanız manuel olarak tam zamanlı çalıştırabilirsiniz.
- Açma/Kapama tuşuna basarak kapatınız.

Kullanım Şekilleri-1




Kullanım Şekilleri-2



Teknik Özellikler

- ❑ Marka: Bellista
- ❑ Cinsi: Termal Isı Yelegi
- ❑ Model: BTV-100
- ❑ Güç: 220 Volt
- ❑ Ölçüler: 55 x 60 x 4 cm
- ❑ Ağırlık: 4 kg
- ❑ Garanti Süresi: 2 Yıl
- ❑ Azami Tamir Süresi: 30 iş günü

Kumanda Kullanımı

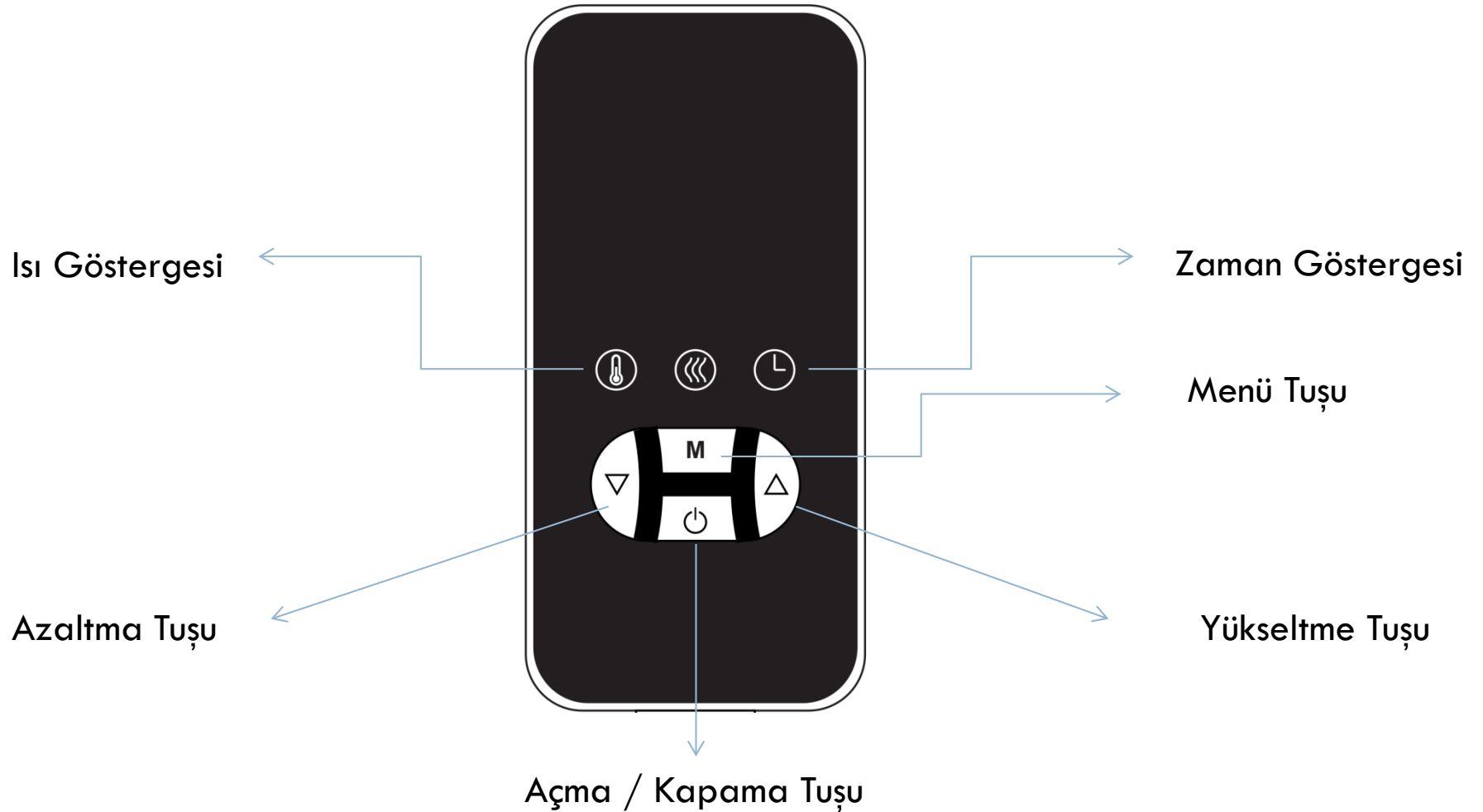

Ürün Bilgisi-1

- Bellista Thermal Vest, doğanın bir mucizesi olan Kisamunsag Yeşim Taşından, günümüz teknolojisi kullanılarak yapılan ve gittiğimiz her yerde yanınızda taşıyabileceğiniz portatif bir Termal Terapi Cihazıdır.
- Kisamunsag Yeşim Taşından emilen ısı, kan dolaşımının hızlanmasını, dolayısı ile kasların, dokuların ve hücrelerin daha çok oksijen ile beslenmesini (Thermoteraph) sağlar.
- Bellista Thermal Vest, uyguladığı bu yöntem sayesinde, vücudumuz da oluşan bir çok akut ve kronik ağrı da son derece etkili bir yardımcıdır.

Ürün Bilgisi-2

- Bellista Thermal Vest, soğuk kış günlerinde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz, en yakın dostunuz olacak.
- Silinebilir kumaş özelliğinin yanında, zaman ayarlı termal ısıtma sistemi ile de oldukça güvenli ve kullanımı kolay bir üründür.

www.normway.com.tr

Dikkat Edilecek Hususlar-1

- AC 220 Volt kullanın.
- Kesinlikle katlayarak kullanmayınız.
- Islak ve nemli ortamlarda kullanmayınız.
- İğne ve kesici cisimleri ürüne batırmayınız, delmeyiniz.
- İhtiyar, engelli ve çocuklara kendi başlarına kullandırtmayınız.
- Uzun süreli kullanımlarda sıcaklığa dikkat ediniz.
- Kullanım anında üzerini ekstra battaniye vb. 1 saatten fazla örtmeyiniz.
- Uyku halinde dikkatli kullanınız.
- Arıza halinde kullanmayınız.

Dikkat Edilecek Hususlar-2

- ❑ Ürünün iç kısmını açmayınız.
- ❑ Hassas bölgelerde kullanmayınız.
- ❑ Arıza halinde yetkili servise haber veriniz.
- ❑ Orijinal kablosunu başka ürünlerde kullanmayınız.
- ❑ Başka bir elektrikli battaniye vs. üzerinde kullanmayınız.
- ❑ Kullanma kılavuzunu okumadan kullanmayınız.

Garanti Belgesi-1

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı – üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

□

Garanti Belgesi-2

- Tüketicie teslim edildiğı tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliğı, ithalatçısı veya ithalatçısı- üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Firma İletişim Bilgileri

- ❑ Firma: Norm Natural Alte.Terapi Gıda Tak. ve Koz.Ürü.San.Tic.Ltd.Şti.
- ❑ Adres: Fındıklı mah. Selvi sok. No:9/A Maltepe / İstanbul / Turkey
- ❑ Tel: 0216 660 06 24
- ❑ Web: www.normway.com.tr
- ❑ E-Posta: info@normway.com.tr

Hayatınıza Değer Katan Markalarımız



Alkali & Antioksidan Su



Ana Grup Marka

BEJLISTA

Kişisel Terapi Cihazları



Doğal Temizlik Ürünleri

MESCARE

Doğal Kişisel Bakım

NGUNAIR

Ozon & Negatif İyon Cih.

jibell®

Yeşim Taşı Aksesuar



Ücretsiz Tanıtım Mağazaları



Alkali & Antioksidan Su



NormBazaar

E-ticaret Mağazası



SAVGU

Gıda Takviyeleri



help to win

Network Marketing

Firma Sosyal Medya



/normway.turkiye



/normway.turkiye



/normway.turkiye



/Normway Türkiye

www.normway.com.tr